



ClearFlex™ Plus masque facial d'anesthésie





ClearFlex™ Plus masque facial d'anesthésie

Le masque facial d'anesthésie ClearFlex Plus est constitué de silicone, avec une coque plastique intégrée. Ce concept aide à offrir une préhension confortable et à maintenir la stabilité du masque. Grâce à sa forme anatomique, le masque ClearFlex Plus procure une étanchéité adéquate avec un minimum de pression tout en offrant une ergonomie optimisée (prise en 'C').

Le masque ClearFlex Plus est disponible en 5 tailles et il peut être retraité jusqu'à 100 fois (autoclave à 134°C).

Raccord sûr et sécurisé

Le raccord conique 22mm permet une connexion sur un ballon de réanimation ou un circuit respiratoire

Code IUD et numéro de série

Permet la traçabilité et le suivi des utilisations du produit



Taille et code-couleur clairement visibles

Numéro et code-couleur facilitant le choix de la taille

4

Conception renforcée


Le renfort moulé intégré aide à maintenir la stabilité du masque et assurer une préhension confortable

Corps transparent

Offrant une excellente visibilité pour surveiller les signes cliniques du patient

Lèvre souple en silicone

S'adaptant à différentes formes de visage pour offrir une étanchéité efficace et confortable

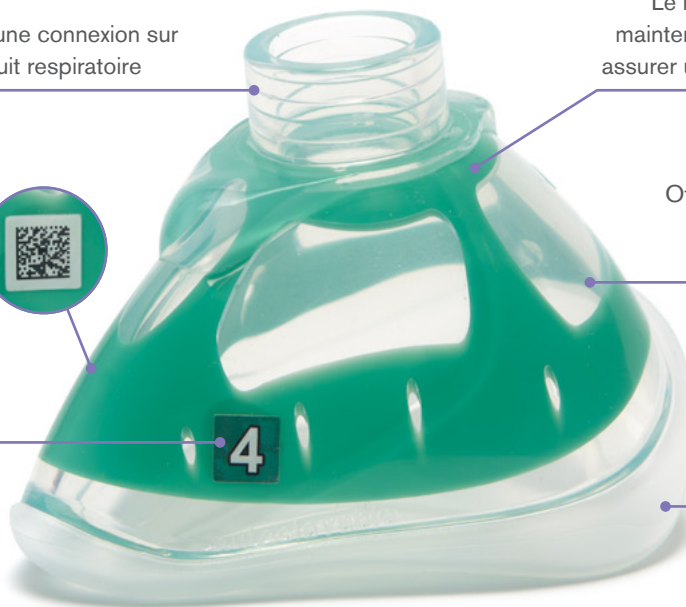

REF	Description	Couleur	Qté/bte
8749666	ClearFlex Plus masque facial d'anesthésie en silicone, taille 6, extra grand adulte, 22F		1
8749555	ClearFlex Plus masque facial d'anesthésie en silicone, taille 5, grand adulte, 22F		1
8749444	ClearFlex Plus masque facial d'anesthésie en silicone, taille 4, moyen adulte, 22F		1
8749333	ClearFlex Plus masque facial d'anesthésie en silicone, taille 3, petit adulte, 22F		1
8749222	ClearFlex Plus masque facial d'anesthésie en silicone, taille 2, pédiatrique, 22F		1

IS5.47 FR • Issue 1 06.26



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP