



Canules nasales double lumière


A utiliser avec des systèmes portables d'oxygène liquide qui conservent l'oxygène en fournissant du gaz uniquement lorsque le patient le demande



Oxygène & Aérosolthérapie ▪ Canules Nasales

Canules nasales double lumière

Les canules nasales double lumière sont spécifiquement conçues pour une utilisation avec les systèmes portables d'oxygène liquide, qu'ils soient activés par électronique ou par pression. Elles sont équipées d'une tubulure multicanaux pour apporter l'oxygène et détecter la pression simultanément pour chaque narine. L'apport d'oxygène s'arrête à la fin de l'inspiration, afin d'optimiser la réserve en gaz. Les canules sont fabriquées à partir du matériau souple avec finition satinée d'Intersurgical.

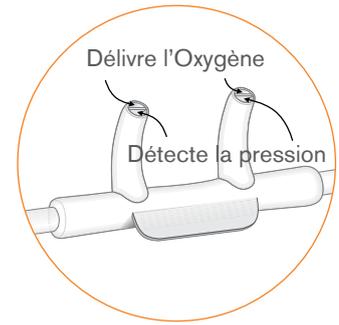

Tubulure multicanaux résistant à l'écrasement

Permet un débit continu d'oxygène même en cas de plicature

Finition satinée

Tuyaux solidaires


Gestion efficace de l'encombrement

Embouts souples

Minimisent l'irritation



Canaux d'apport et de détection sur chaque embout

Réponse optimale à la demande et évite le déséquilibre entre les narines

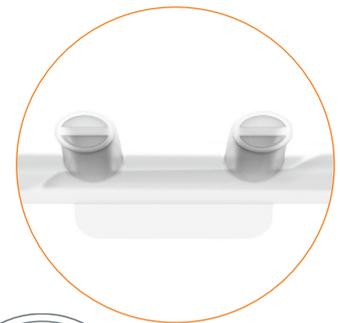

Embouts courbes :

Forme anatomique pour un ajustement amélioré

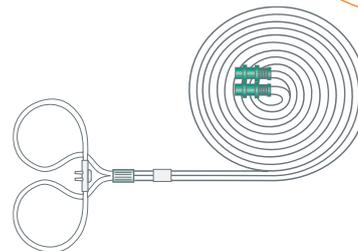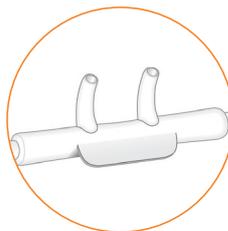

REF	Description	Long.	Qté/bte
1165011	Canule nasale double lumière adulte avec embouts courbes et tuyau	1.25m	50
1165012	Canule nasale double lumière adulte avec embouts courbes et tuyau	1.8m	50
1165013	Canule nasale double lumière adulte avec embouts courbes et tuyau	2.5m	50

HELIOS est une marque déposée de CAIRE® Inc.

IS10.30 FR • Issue 6 12.23



7 bis, Rue Pelloutier, CS 11064 Croissy-Beaubourg, 77435 Marne-La-Vallée Cedex 2
T: +33 (0)1 48 76 72 30 info@intersurgical.fr www.intersurgical.fr



Le fabricant Intersurgical Ltd est certifié
ISO 14001:2015, ISO 9001:2015,
ISO 13485:2016 et MDSAP